

## Overzicht maten en opties

Tabel A zithoogte in mm

Type frame	Standaard poot (s)	Wielpoot (o)	Aanschuifwiel voorpoot (o)	Kussen 80 (s)	Kussen 110 niet meer leverbaar	Zwenkwiel (o)	Min zithoogte	Max zithoogte
standaard (s)	355			80			435	535
standaard (s)		355		80		55	490	590
standaard (s)			355	80			435	535
laag (o)	295			80			375	475
laag (o)		295		80		55	430	530
laag (o)			295	80			375	475

(s) standaard

(o) optie


Tabel B overige instelmogelijkheden

Zithoogte	Zithoek	Rughoek	Zitbreedte	Zitdiepte	Armlegger hoogte 80 mm kussen	Armlegger hoogte 110 mm kussen	Rughoogte
	traploos	traploos	traploos*	traploos	stappen 1 cm	stappen 1 cm	
zie tabel A	0° - 12°	90° - 125°	40cm - 56cm	40cm - 55cm	16cm - 26cm	13cm - 23cm	52cm (60cm optie)

\*kussen breedte 42cm en 50cm zijn opties, kunnen wellicht nodig zijn om de gewenste maat te halen.

Tabel C opties

Opties
Zwenkwieken vanaf zithoogte 43cm
Aanschuifwiel voorpoot
Pelot
Cristasteun
Hoofdsteun
Permanente Zithoek verstelling
Werkblad
Zitplank / drempelkussen tbv een inlegkussen (AD kussen)
Steunkussens voor de bovenbenen
Zitkussen breedte 42cm
Zitkussen breedte 50cm
Rugkussen breedte 42cm
Rugkussen breedte 50cm
Rugkussen hoogte 60cm

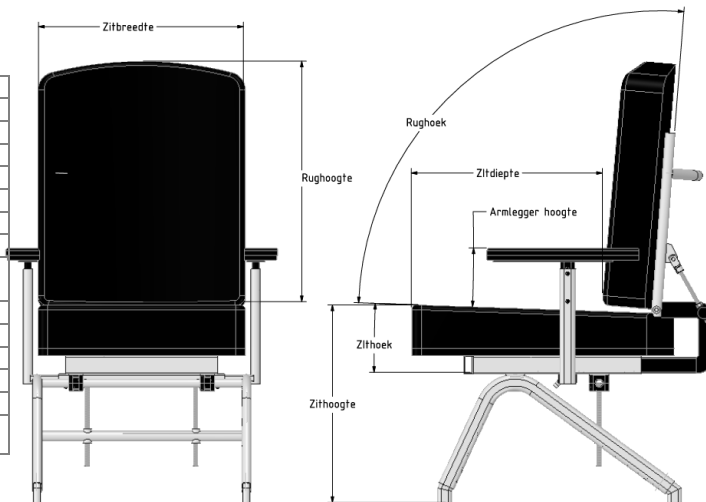

## HKS1

De Multi instelbare en inzetbare stoel voor thuis, verpleeghuis, instelling en revalidatie



### Multi- instelbare, inzetbare stoel (HKS1)

Vanuit diverse verpleeghuizen is de vraag gekomen om een instelbare, herinzetbare stoel te ontwikkelen voor de nog ambulante mens, die vaak langdurig in een slechte c.q. ongewenste houding zit.

Het resultaat is de HKS1. In de praktijk blijkt het een prima aanvulling op de reeds bestaande zitoplossingen. Het is een stoel met de zit- en instelmogelijkheden van een rolstoel. De positionermogelijkheden zijn daardoor veel uitgebreider dan bij de standaard stoelen, waardoor iedereen goed in de stoel te positioneren is en tegelijkertijd de kans op doorzitplekken wordt geminimaliseerd.

Bij de ontwikkeling hebben de maatvoering en de specifieke anatomie van de mens op gevorderde leeftijd centraal gestaan. De rugleuning, de zitting en de armleggers zijn dusdanig vormgegeven en instelbaar zodat bij correcte afstelling op de juiste plaatsen de goede steun wordt gegeven en de gewenste, prettige zithouding wordt gerealiseerd. In de praktijk blijkt de inzetbaarheid van deze stoel voor alle leeftijden te zijn.

Zithoogte, zithoek, zitdiepte, armleggerhoogte, armlegger positie, zitbreedte en rughoek zijn instelbaar. Verder is de stoel uitgevoerd met een gepolsterde spanbandenrug. De zitting is geprofileerd en voorzien van singels ter voorkoming van drukplekken onder het zitvlak.

### Bij meer complexe situaties van het positioneren, kan de stoel worden uitgevoerd met opties:

- Pelotten
- Cristasteun
- Hoofdsteun
- Aanschuif wielen op de voorpoot
- Zwenkwielen (vanaf zithoogte 43 cm)
- Permanente zithoek verstelling
- Steunkussens voor de bovenbenen
- Werkblad
- Zitplank / drempelkussen t.b.v. een inlegkussen (AD kussen)



Inmiddels heeft de stoel zich al bewezen een goede aanvulling te zijn op de zitoplossingen die op de markt zijn voor thuis, verpleeghuis, instelling en revalidatie. De stoel kan bijvoorbeeld worden gebruikt als huiskamerstoel, maar ook als eetkamerstoel.

### Standaard uitvoering en instelmogelijkheden :

- Standaard 80 mm zitkussen breedte 45cm met afwasbare toplaag
- Zithoogte instelbaar in stappen van 1 cm van 40,5 cm t/m 50,5 cm
- Zithoek traploos in hoek instelbaar van 0° (horizontaal) tot 12° (achterover)
- Zitdiepte traploos instelbaar van 40 cm t/m 55 cm
- Zitbreedte traploos instelbaar tussen 42 cm en 47 cm
- Rughoek traploos instelbaar van 90° tot 125°
- Armleggerhoogte in stappen van 1 cm instelbaar van 19 t/m 29 cm boven. zitvlak.
- P-vormige armlegger
- Rughoogte 52 cm en breedte 45cm
- Ruginstelling hoogte kan 5 cm variëren, om het bekken optimaal te ondersteunen.



### Achtergrond Retecco

Retecco is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen bedrijven die al vele jaren actief zijn in de revalidatietechniek.

Retecco beschikt over kennis en ervaring op het gebied van zitten, mobiliteit, ontwikkelen en produceren van onderdelen, aanpassingen en complete producten voor de revalidatietechniek. Vanuit deze achtergrond heeft Retecco zich ten doel gesteld producten te ontwikkelen en op de markt te brengen die een raakvlak hebben met de revalidatietechniek.

Een belangrijk standpunt bij de productie en de ontwikkeling is het streven betere producten te maken die tegelijkertijd innoverende zijn.

Tevens staat Retecco open om kennis uit te wisselen en om mee te denken over vragen, wensen en mogelijke verbeteringen op de arbeidsvloer in relatie tot de revalidatietechniek. Een voorbeeld is de huiskamerstoel. Daarnaast beschikken we in de individueelbouw over een actief/passiefstoel en produceren we o.a. stabiele, wegklapbare hoofdsteunhouders en cristasteunen welke in specifieke situaties bijdragen aan een goed (zit)resultaat.

